

Больничная функциональная кровать Carena. Описание.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: maa@nt-rt.ru

www.merivaara.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

Carena

Больничная функциональная кровать
модульной конструкции




Функциональная кровать, отвечающая самым взыскательным требованиям современного ухода за пациентом

Глубокое маркетинговое исследование и тщательный анализ потребностей современного ухода за пациентом позволили Merivaara создать революционно новую функциональную кровать. Carena призвана существенно облегчить труд медицинского персонала в условиях увеличения среднего веса и общего старения населения. Для помощи престарелым и тяжелым больным Merivaara создала кровать, позволяющую садиться и вставать с нее без посторонней помощи даже самым невысоким пациентам. Нагрузочная способность в 275 кг позволит даже особо крупным пациентам с комфортом расположиться на кровати. Carena равно подходит как для оказания экстренной реанимационной помощи, так и для использования в отделениях ПИТ и для длительного ухода за пациентом.



- Высокая нагрузочная способность: 275 кг
- Уникально низкое и высокое положения ложа: 295 мм – 890 мм
- Непревзойденная физиологичность кровати для пациента:
 - 4-х секционное ложе
 - Электропривод регулировки Тренделенбург (опция)
 - Возможность для пациента самостоятельно садиться/вставать с кровати
- Реальное удобство и эргономичность изделия для медицинского персонала
 - Эргономичное рабочее место
 - Легкость очистки
 - Многофункциональные принадлежности
 - Совершенная тормозная система
- Удобство использования
- Малый вес (100 кг) – легкость перемещения кровати
- Инновационная конструкция и оригинальный дизайн
- Богатая цветовая палитра
- Долгий срок службы, простота и нетребовательность в уходе

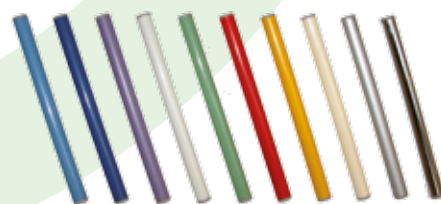

Carena



Carena – исключительно эргономичная и удобная как для пациента, так и для медицинского персонала функциональная кровать. Регулировки с электроприводом позволяют быстро и плавно изменять конфигурацию кровати. Внешне легкая, кровать способна выдерживать как пациентов большого веса, так и дополнительную нагрузку при осуществлении реанимационных мероприятий.



4-х секционное матрасное основание

Оптимальный размер бедренной секции Carena обеспечивает комфорт пациенту при регулировке ложа. Физиологически правильные положения пациента крайне важны для повышения эффективности терапии. И все они достижимы с использованием 4-х секционного ложа.



Уникальный механизм регулировки спинной секции

В процессе подъема спинная секция плавно движется назад. Функция скольжения значительно снижает давление на спину пациента при подъеме секции. При этом также отсутствует эффект «сталкивания» пациента с кровати.



Уникально низкое положение ложа: 295 мм – стимул к самостоятельному движению пациента

Прочная конструкция кровати опускается на столь малую высоту, что даже самые низкие, престарелые и тяжелые пациенты могут сесть и встать с кровати самостоятельно. Удобно расположенные рукоятки на концах и по сторонам кровати – отличное в том подспорье. При этом сложенные боковые ограждения не являются помехой.



Carena 295 мм

Нижайшее положение
обычной кровати

Максимальный вес пациента – 275 кг

Полная уверенность в надежной работе изделия при расположении пациентов практически любого веса.

Электропривод регулировки Тренделенбург

Революционная конструкция Carena позволяет осуществлять регулировку Тренделенбург и при крайне низкой высоте ложа. Электропривод данной регулировки дает больше свободы при осуществлении процедур. Возможен также пневмопривод Тренделенбург.



Дополнительный комфорт

Эргономичное комфортное для пациента положение кровати установить крайне просто – одно нажатие на клавишу пульта управления позволяет одновременно поднимать / опускать спинную и бедренную секции кровати.

Carena создана на основе анализа требований работников современных клиник. Новые функции и принадлежности удобны для персонала и ощутимо помогают в его нелегком труде. Дизайн нового матрасного основания, съемных плат ложа, новая система тормозов и множество иных выдающихся функций будут, несомненно, по достоинству оценены медицинским персоналом.



Эргономичность

Изящная легкая (весом около 100 кг) конструкция кровати Carena позволяет перемещать ее без усилий. Немаловажную роль играет и тщательно отобранный материал колес. В итоге – невероятная легкость транспортировки даже самых тучных пациентов. Пространство под ложем позволяет идти вплотную к кровати при ее перемещении.



Простота ухода

Дизайн нового матрасного основания и новые покрывающие платы ложа существенно облегчают такие рутинные процедуры, как очищение и застилание кровати. Откидывающийся торец кровати улучшает доступ медсестры для мытья кровати и создает дополнительную рабочую поверхность для размещения, например, постельного белья и принадлежностей. (Предлагается в качестве опции).



Аккуратный подъем

Движение ложа вверх не требует дополнительного пространства. Подъем кровати возможен даже в очень тесном помещении.

По-сути, 5-секционное ложе (опция)

Спинная секция по желанию заказчика может быть разделена надвое, образуя отдельную регулируемую опору для поддержки шеи и головы.





Простота содержания в чистоте

Чистые мягкие линии, отсутствие острых углов, небольшие зазоры и съемные платы ложа кровати не позволяют грязи скапливаться и существенно упрощают чистку кровати.

Рельс для принадлежностей

Может использоваться взамен боковых ограждений для крепления, например, опоры для руки (опция).

Торцы нового дизайна

Удобны при транспортировке пациента на кровати, держась за рукоятки для захвата и угловые участки рамы, покрытые нескользящим материалом.

Удобная система центрального тормоза

Педаль нового (типа «бабочка») дизайна позволяет легче снять кровать с тормоза. Возможность установки тормозных педалей даже на 4 колеса (опция).

Дополнительные опции

- 5-е колесо - для транспортировки в узком пространстве
- Возможность работы от встроенного аккумулятора
- Дополнительная плата для удлинения ложа на 30 см



Carena

Carena предоставляет возможность покупателю самостоятельно «от и до» выстроить изделие из набора модулей, предоставляемых Merivaara (как, например, тип и покрытие ложа, количество электромоторов, колесная база, цветовое решение).





Широкий выбор дополнительных принадлежностей

Позволяет укомплектовать изделие как для палат реанимации и ПИТ, так и для специализированных больничных отделений и долгосрочного ухода. Большинство принадлежностей к кроватям Merivaara подходят также и к Carena. Предыдущие модели кроватей могут быть укомплектованы новыми принадлежностями.



Варианты построения матрасного основания

Merivaara предлагает для Carena матрасные основания шириной 80 и 90 см с покрывающими платами из металлической сетки или ABS-пластика.



Исключительно долгий жизненный цикл

Carena – прочное несложное в уходе изделие, созданное для ежедневного интенсивного использования долгие годы. Класс защиты - IP66 (полная пылезащищенность, отсутствие негативных эффектов от непродолжительного погружения в воду).

Богатая палитра цветов

Merivaara помогает украсить и оживить больничное пространство. Мы предлагаем 10 стандартных вариантов цветового решения и антибактериальное покрытие в качестве опции.



Неприхотливость в обслуживании


Благодаря новой конструкции обслуживание кровати несложно: съемные платы ложа дают полный доступ к ложу и компонентам изделия. В целом необходимость в обслуживании минимальна.

Качество

Функциональная кровать Carena соответствует новейшим медицинским директивам и стандартам: IEC 601-2-52 (от 01.11.2008), IEC 601-1-2 (EMC) и SFS-EN 60601-1. Carena разработана, производится и поставляется в соответствии со стандартом системы качества производства ISO 9001: 2000 + (медицинских изделий) ISO 13485: 2003. Производство Merivaara безопасно для окружающей среды, что подтверждено сертификатом стандарта ISO 14001: 2004.

Матрацы

- Medi-Form вязкоупругие 80 см, гигиеничное покрытие 100000948
- Medi-Form вязкоупругие 90 см, гигиеничное покрытие 100000949
- Mediultra, гигиеничное покрытие, 80 см 100000931
- Mediultra, гигиеничное покрытие, 90 см 100000933
- Medi-Flex-Safe, гигиеничное покрытие, 80 см 100000941
- Medi-Flex-Safe, гигиеничное покрытие, 90 см 100000943
- Medi-Tricot, трикотажное покрытие, 80 см 100000935
- Medi-Tricot, трикотажное покрытие, 90 см 100000936

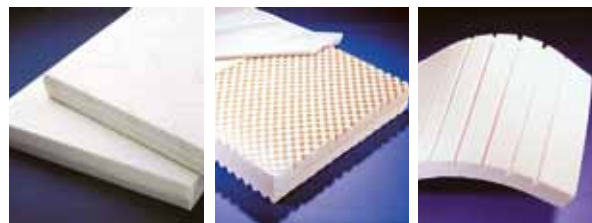

Боковые ограждения

- 1-секционные складывающиеся A41974400 по всей длине ложа хромированные или с эпоксидным покрытием



A41974400

Торцы кровати

- Торец кровати, 80 см 100009890
- Торец кровати, 90 см 100009990
- Откидывающийся торец кровати, 80 см A41935200
- Откидывающийся торец кровати, 90 см A41982900
- Новый эргономичный (48 см) торец кровати, 80 см A41948700
- Новый эргономичный (48 см) торец кровати, 90 см A42180400
- Новый эргономичный (40 см) торец кровати, 80 см A42180500
- Новый эргономичный (40 см) торец кровати, 90 см A42180100




100009890, 100009990

A41935200, A41982900

A41948700, A42127900

Цвета вставки торцов:

- Голубой RAL 5024
- Синий RAL 5023
- Фиолетовый RAL 4012
- Белый RAL 9002
- Светло-зеленый RAL 6021
- Красный RAL 3020
- Желтый RAL 1003
- Бежевый RAL 1015
- Бук

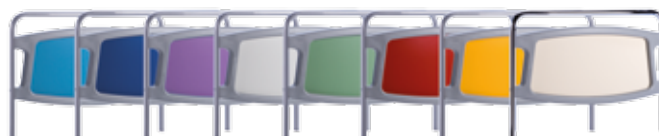

Цвет матрасного основания / нижней рамы / подъемного механизма

- Голубой RAL 5024
- Синий RAL 5023
- Фиолетовый RAL 4012
- Белый RAL 9002
- Светло-зеленый RAL 6021
- Красный RAL 3020
- Желтый RAL 1003
- Бежевый RAL 1015
- Серебристый RAL 9006
- Серебристый RAL 9006, антибактериальное покрытие
- Хромированный



A41978500, A41978600



A41978000, A41978400

Матрасное основание

- 80 см металлическая сетка A41978500
- 90 см металлическая сетка A41978600
- 80 см ABS-пластик A41978000
- 90 см ABS -пластик A41978400



A41995500, A41996300



A41868700, A41975800

Спинная секция с опорой для шеи


- 80 см металлическая сетка с опорой для шеи A41995500
- 90 см металлическая сетка с опорой для шеи A41996300

Удлинение ножной секции

- Удлинение на 30 см ножной секции 80 см A41868700
- Удлинение на 30 см ножной секции 90 см A41975800



A41856300

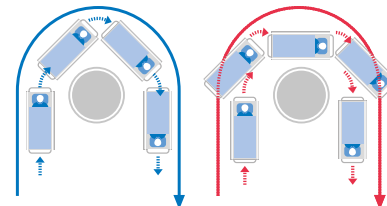

Колеса

- 125 мм специального дизайна
- 150 мм специального дизайна
- 200 мм специального дизайна
- Пятое колесо (опция) A41856300

Корзины

- Решетчатая корзина для истории болезни 128009784
- Сервисная корзина A41955500

Поддоны

- Стеллаж для монитор и журналов 128009768

Электрические компоненты

- Обслуживающая панель управления TLB A41987800

Инфузионные стойки

- С 2 крючками 100005780
- С 4 крючками 100000499
- Инфузионная стойка к устройству для приподнятия 100000713



128009784



A41955500



128009768



A41987800



100005780



100000499



100000713

Держатели

- Держатель мочеприемного мешка (спинная секция) A42097900
- Держатель мочеприемного мешка A41916000
- Крюк A41955300
- Держатель мочеприемного мешка (бутыли) 128009790




A41916000



A42097900



A41955300

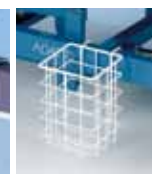


128009790

Прочие принадлежности

- Устройство для приподнятия с ручкой A41884100
- Ручка-кляпка A4184500
- Опора для руки 100000127
- Ручки для перемещения кровати, складные 100009756



A41884100

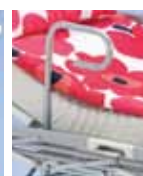

A4184500



100000127



100009756

- Рельс для принадлежностей, 1 шт. 100000701
- Опора для выравнивания матрасов A41986900
- Держатель пульта управления A42038900
- Опорная ручка-кляпка и держатель пульта управления A42066600



100000701



A41986900



A42038900



A42066600

- Элементы крепления принадлежностей для спинной секции A41980200
- Устройство «уровень» A42068000
- Крюк для электрокабеля A41987307
- Держатель кислородного баллона A41897900



A41980200



A42068000



A41987307



A41897900

Технические характеристики:


- Матрачное основание – 4-х секционное, обводная рама – из стальной трубы округлого сечения с хромированным или эпоксидным покрытием
- Покрывающие платы ложа – из высокопрочного ABS-пластика или металлической сетки
- Рама матрачного основания, нижняя рама основания и подъемный механизм – сталь с хромированным или эпоксидным покрытием
- 4 колеса диам. 125, 150 или 200 мм с системой центрального тормоза
- 2 или 4 (опция) тормозные педали типа «бабочка»

Регулировки:

- Электрические регулировки (с помощью пульта ручного управления): спинной секции (0° ... + 70°), верхней ножной (бедренной) секции (0° ... + 29°), одновременного движения спинной и ножной секций, высоты матрачного основания (295 - 890 мм, зависит от размера колес), Тренделенбург (12°)/ анти-Тренделенбург (6°).
- Пневматические регулировки (с помощью ручек): экстренный Тренделенбург / анти-Тренделенбург, экстренное опускание спинной секции, нижней ножной (голеней) секции (0° ... - 24°).

Габариты:

- Длина: 2154 мм
- Ширина: 800 / 885 мм или 900 / 985 мм (без / с боковыми ограждениями)
- Вес: 100 - 110 кг
- Максимальная нагрузочная способность – 275 кг

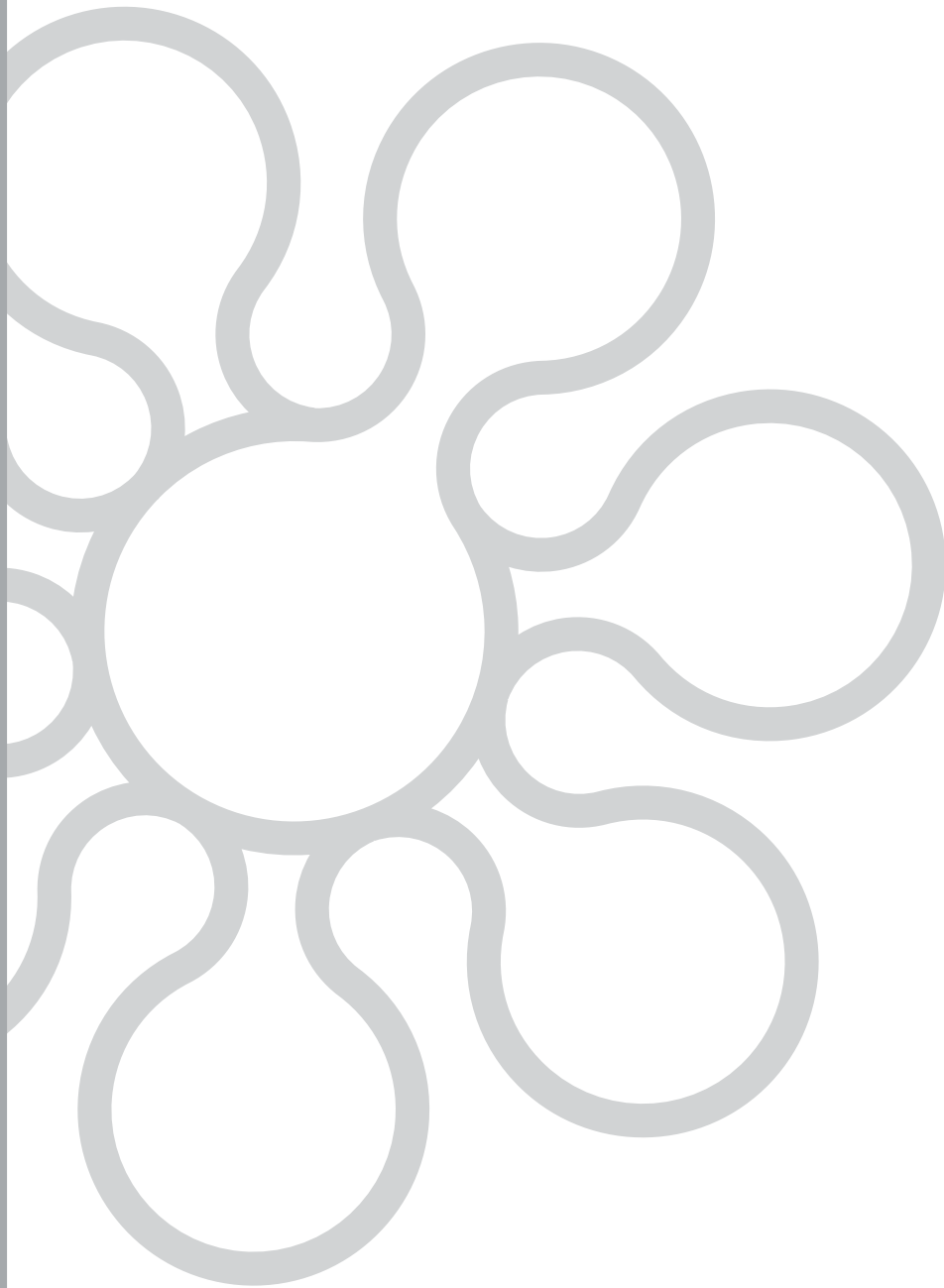

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: maa@nt-rt.ru

www.merivaara.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69